

# NEURO-TOX

Dispositivo EMG/STIM para inyecciones guiadas

## PRECISIÓN EN LA LOCALIZACIÓN

del sitio de inyección




- Diseño dos en uno: Grabador EMG y estimulador eléctrico
- Localización del sitio de inyección utilizando EMG espontáneo o estimulación eléctrica
- Portátil
- Control intuitivo
- Indicación EMG auditivo y visual

EMG



Neurosoft

Un equipo especial es necesario cuando la eficiencia del tratamiento depende de la localización precisa del sitio de inyección de la medicación. El dispositivo portátil Neuro-Tox ayuda de una manera rápida y precisa a localizar la actividad o respuesta muscular a la estimulación eléctrica mediante un registro EMG. Su calidad de señal superior previene una localización imprecisa, mientras su interfase intuitiva permite una manipulación intuitiva en poco tiempo.

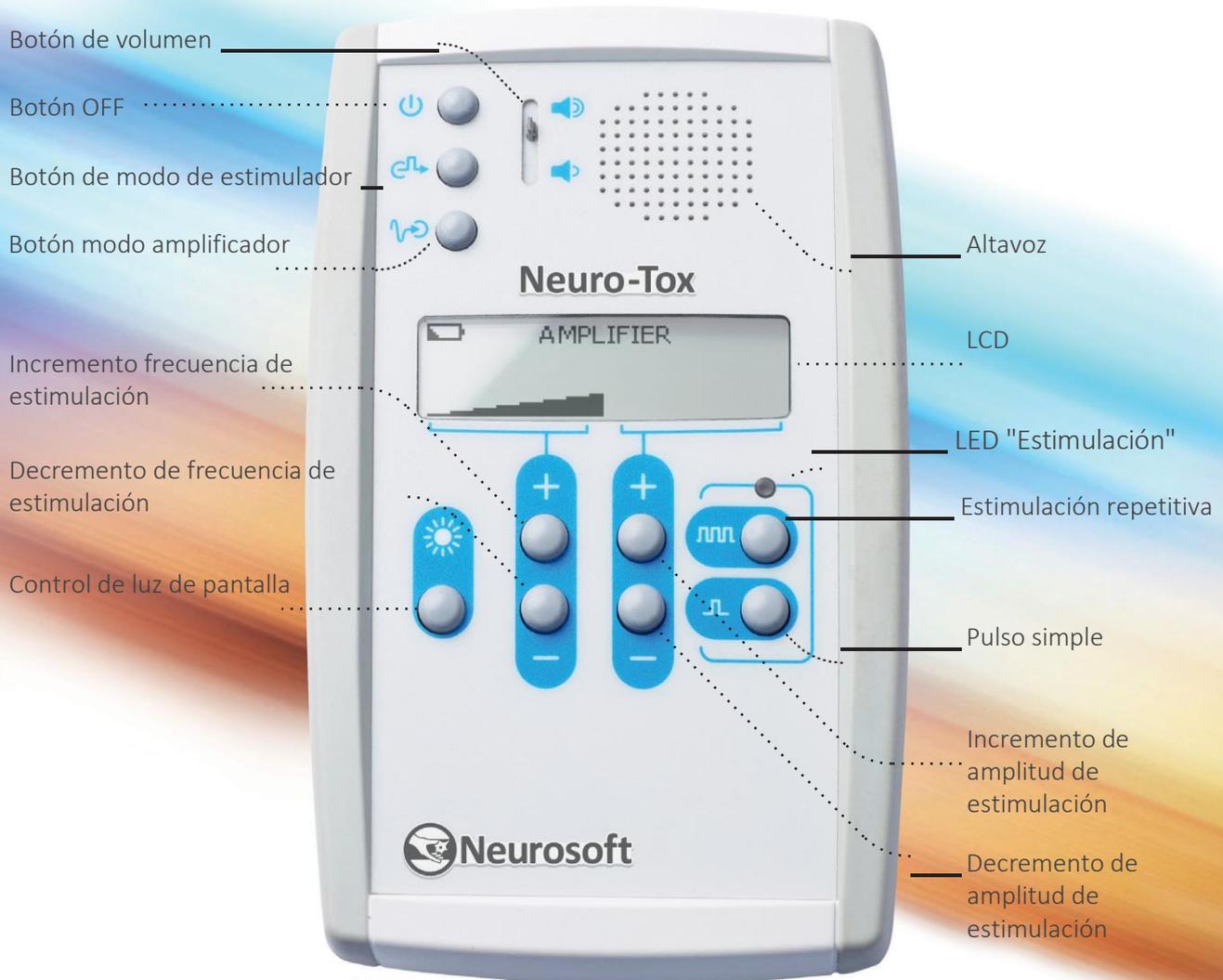

## APLICACIÓN:

Distonía focal: blefaroespasmos, distonía cervical, calambre del escribiente, distonía oromandibular, distonía de torsión, estrabismo

Rehabilitación de paciente con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, efecto de lesiones craneocerebrales, trauma médula espinal, stroke

Síndrome del dolor miofacial y vertebrogénico, tensión por jaqueca, hiperhidrosis primaria focal, líneas faciales hiperfuncionales



*¡Es extremadamente sencillo determinar la respuesta EMG por la reproducción del sonido!*

# NEURO-TOX: CUANDO LO SIMPLE IMPORTA

El dispositivo Neuro-Tox está diseñado para conectar un electrodo de aguja especial con la jeringuilla. El electrodo se inyecta en el músculo mientras que el paciente contrae y se registra la señal EMG. Cuanto mayor sea la amplitud de la señal más cerca se está del músculo objetivo. Si el paciente no es capaz de contraer el músculo se usa la estimulación eléctrica. Todo lo que se necesita es hacer una inyección en el sitio objetivo.



*El sonido se hace más alto cuando la aguja alcanza el músculo objetivo*



# ASISTENCIA INTEGRAL Y SERVICIO TÉCNICO



Al elegir nuestro producto podrá contar con nuestro soporte completo que ofrecen nuestros especialistas en Neurosoft.



Junto con el equipo usted recibirá manuales detallados de usuario y técnico.



Ofrecemos 24 meses de garantía para las unidades electrónicas y actualizaciones de software durante toda la vida útil del equipo.

## CON EL NEURO-TOX USTED RECIBE:

- El dispositivo Neuro-Tox
- Control remoto
- Auriculares
- Electrodo de aguja hipodérmica descartable
- Cable de conexión para electrodo descartable con "botón" clip – touch-proof
- Electrodo de superficie descartables
- Cargador con baterías descartables



**Distribuidor Autorizado en México, CODITECH.**  
Cerrada Congreso 54 Col. Colinas, Hermosillo Sonora Mex. C.P. 83145  
Ofic. +52 1 662 267 8958 WhatsApp. +52 1 662 467 6279  
[ventas@coditech.mx](mailto:ventas@coditech.mx) [www.coditech.mx](http://www.coditech.mx)



[www.neurosoft.com](http://www.neurosoft.com), [info@neurosoft.com](mailto:info@neurosoft.com)  
Phone: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99  
Fax: +7 4932 24-04-35  
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia